



# SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

## Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!  
See the following pages for more information!



### Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

### Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

### SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0



F. +43(0)1 489 3961-7

[mail@szabo-scandic.com](mailto:mail@szabo-scandic.com)

[www.szabo-scandic.com](http://www.szabo-scandic.com)

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 



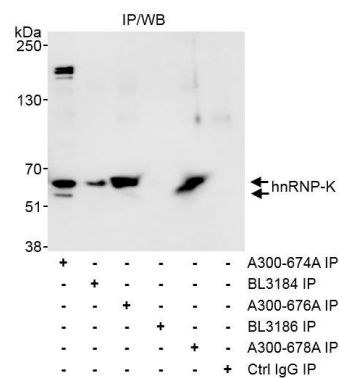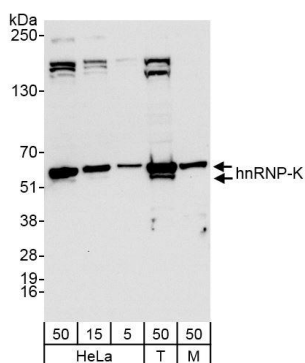


### Detection of human and mouse hnRNP-K by western blot.

**Samples:** Whole cell lysate from HeLa (5, 15 and 50 µg), HEK293T (T; 50 µg) and mouse NIH 3T3 (M; 50 µg) cells. **Antibodies:** Affinity purified rabbit anti-hnRNP-K antibody A300-674A (lot A300-674A-1) used for WB at 0.04 µg/ml. **Detection:** Chemiluminescence with exposure time of 10 seconds.

### Detection of human hnRNP-K by western blot of immunoprecipitates.

**Samples:** Whole cell lysate (1 mg for IP, 20% of IP loaded) from HeLa cells. **Antibodies:** Affinity purified rabbit anti-hnRNP-K antibody A300-674A (lot A300-674A-1) used for IP at 3 µg/mg lysate. hnRNP-K was also immunoprecipitated by rabbit anti-hnRNP-K antibodies BL3184, A300-676A, BL3186 and A300-678A. For blotting immunoprecipitated hnRNP-K, A300-674A was used at 1 µg/ml. **Detection:** Chemiluminescence with exposure time of 10 seconds.

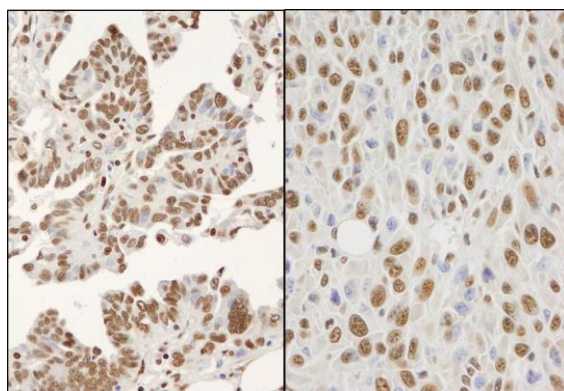

**Detection of human and mouse hnRNP-K by immunohistochemistry.** **Sample:** FFPE section of human ovarian carcinoma (left) and mouse squamous cell carcinoma (right). **Antibody:** Affinity purified rabbit anti-hnRNP-K (Cat. No. A300-674A Lot1) used at a dilution of 1:1,000 (0.2µg/ml). **Detection:** DAB