



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com


www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 



Coomassie Brilliant Blue G250

Catalog No:	03282
Lot No:	XXXXXX
Cas No:	6104-58-1
Formula:	C ₄₇ H ₄₈ N ₃ NaO ₇ S ₂
MW:	854.04
Supplied as:	solid
Stability:	stable at room temperature

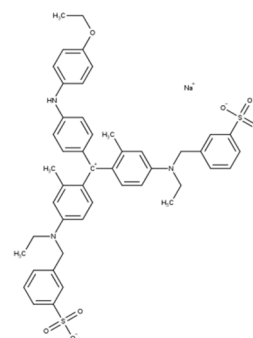

Background

Coomassie Brilliant Blue is the name of two similar triphenylmethane dyes that are commonly used for staining proteins in analytical biochemistry. Coomassie Brilliant Blue G-250 differs from Coomassie Brilliant Blue R-250 by the addition of two methyl groups. The first report of the use of the "G" form of the dye to visualise protein bands in polyacrylamide gels came in 1967, where the dye was dissolved in an acetic acid solution containing methanol. It was subsequently discovered that the protein bands could be stained without staining the polyacrylamide by using a colloid of the "G" form of the dye in a trichloroacetic acid solution containing no methanol. Using this procedure it was no longer necessary to destain the gel. Modern formulations typically use a colloid of the "G" form of dye in a solution containing phosphoric acid, ethanol (or methanol) and ammonium sulfate (or aluminium sulfate).

Tests

Appearance:	violet-black powder
λ_{max.} (Buffer pH 7.0)	608 – 618 nm
E 1%/ 1 cm λ_{max.} (pH 7.0)	≥ 420
Absorption ratio (λ_{max.}-15nm/λ_{max.}+15nm)	0.95 - 1.15
Loss on drying (105°C)	≤ 10%

Specifications

Appearance:	violet-black powder
λ_{max.} (Buffer pH 7.0)	608 – 618 nm
E 1%/ 1 cm λ_{max.} (pH 7.0)	≥ 420
Absorption ratio (λ_{max.}-15nm/λ_{max.}+15nm)	0.95 - 1.15
Loss on drying (105°C)	≤ 10%

Usage

This product is offered by Biomol for research purposes only. Not for diagnostic purposes or human use. It may not be resold or used to manufacture commercial products without written approval of Biomol GmbH.