



# SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

## Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!  
See the following pages for more information!



### Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

### Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

### SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

[mail@szabo-scandic.com](mailto:mail@szabo-scandic.com)

[www.szabo-scandic.com](http://www.szabo-scandic.com)


[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

## Product Information


<b>Construct:</b>	CD93 (24-580-Fc(IgG1)-Avi)-(Biotin)
<b>Label:</b>	This protein is enzymatically biotinylated using Avi-Tag™ technology. Biotinylation is confirmed to be ≥90%.
<b>Concentration:</b>	0.33 mg/ml
<b>Species:</b>	Human
<b>Formulated In:</b>	8 mM phosphate, pH 7.4, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, and 20% glycerol
<b>Expression System:</b>	HEK293
<b>Format:</b>	Aqueous buffer solution
<b>Stability:</b>	At least 6 months at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
<b>Storage:</b>	-80°C
<b>Genbank Accession:</b>	NM_012072.4
<b>MW:</b>	87 kDa + glycans
<b>Glycosylation:</b>	This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
<b>Purity:</b>	≥90%
<b>Assay Conditions:</b>	IGFBP7 protein (BPS Bioscience #101545) was coated onto a 96-well plate overnight at 4°C (50 µl/well at a concentration of 4 µg/ml in PBS). The plate was washed 3 times with Immuno Buffer 1 (BPS Bioscience #79311) and blocked using 100 µl of Blocking Buffer 2 (BPS Bioscience #79728) for 1 hour at room temperature. After removing the blocking buffer, 50 µl/well of purified biotinylated CD93 protein (BPS Bioscience #101544), serially diluted in Blocking Buffer 2, was added for 30 minutes at room temperature. After 3 more washes, the plate was incubated with Streptavidin-HRP, washed, and incubated with the Colorimetric HRP substrate. The reaction was stopped, and absorbance was read at 450 nm. The Blank value was subtracted from all values.
<b>Applications:</b>	Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.

## Quality Control Data


4-20% SDS-PAGE Coomassie Staining

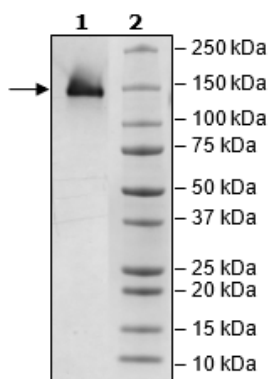

IGFBP7: CD93-Biotin Activity

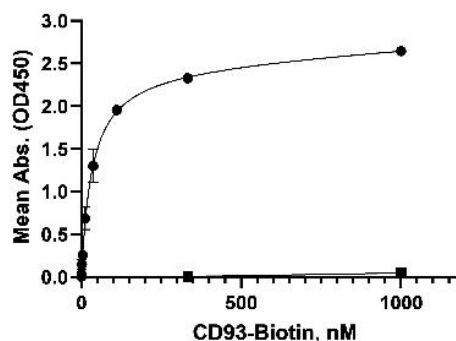

Biotin-Avidin Pulldown

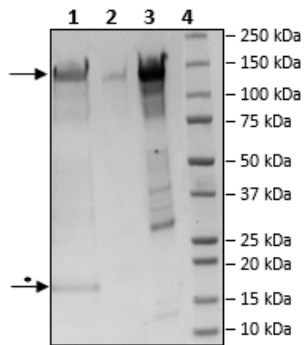

1. Beads
2. Flow thru
3. Control
4. Standards

\* Avidin from beads.