



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com


[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 



RAI14 Antibody

Product Code	CSB-PA868376LA01HU
Abbreviation	Ankycorbin
Storage	Upon receipt, store at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze.
Uniprot No.	Q9P0K7
Immunogen	Recombinant Human Ankycorbin protein (242-346AA)
Raised In	Rabbit
Species Reactivity	Human
Tested Applications	ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:500-1:1000
Relevance	cytosol, fibrillar center, nucleus
Form	Liquid
Conjugate	Non-conjugated
Storage Buffer	Preservative: 0.03% Proclin 300 Constituents: 50% Glycerol, 0.01M PBS, pH 7.4
Purification Method	>95%, Protein G purified
Isotype	IgG
Clonality	Polyclonal
Alias	Ankycorbin (Ankyrin repeat and coiled-coil structure-containing protein) (Novel retinal pigment epithelial cell protein) (Retinoic acid-induced protein 14), RAI14, KIAA1334 NORPEG
Species	Homo sapiens (Human)
Research Area	Cell Biology
Target Names	RAI14

Image

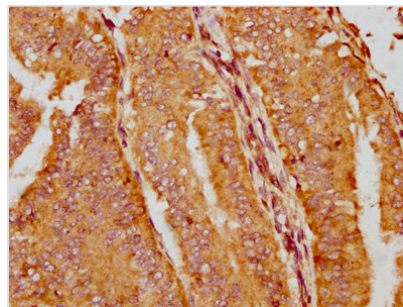

IHC image of CSB-PA868376LA01HU diluted at 1:700 and staining in paraffin-embedded human endometrial cancer performed on a Leica Bond™ system. After dewaxing and hydration, antigen retrieval was mediated by high pressure in a citrate buffer (pH 6.0). Section was blocked with 10% normal goat serum 30min at RT. Then primary antibody (1% BSA) was incubated at 4°C overnight. The primary is detected by a biotinylated secondary antibody and visualized using an HRP conjugated SP system.