



# SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

## Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!  
See the following pages for more information!



### Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

### Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

### SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

[mail@szabo-scandic.com](mailto:mail@szabo-scandic.com)

[www.szabo-scandic.com](http://www.szabo-scandic.com)


[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 



# MIEN1 Antibody

<b>Product Code</b>	CSB-PA874795LA01HU
<b>Abbreviation</b>	Migration and invasion enhancer 1
<b>Storage</b>	Upon receipt, store at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze.
<b>Uniprot No.</b>	Q9BRT3
<b>Immunogen</b>	Recombinant Human Migration and invasion enhancer 1 protein (2-112AA)
<b>Raised In</b>	Rabbit
<b>Species Reactivity</b>	Human
<b>Tested Applications</b>	ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:200-1:500
<b>Relevance</b>	Increases cell migration by inducing filopodia formation at the leading edge of migrating cells. Plays a role in regulation of apoptosis, possibly through control of CASP3. May be involved in a redox-related process.
<b>Form</b>	Liquid
<b>Conjugate</b>	Non-conjugated
<b>Storage Buffer</b>	Preservative: 0.03% Proclin 300 Constituents: 50% Glycerol, 0.01M PBS, pH 7.4
<b>Purification Method</b>	>95%, Protein G purified
<b>Isotype</b>	IgG
<b>Clonality</b>	Polyclonal
<b>Alias</b>	Migration and invasion enhancer 1 (HBV X-transactivated gene 4 protein) (HBV XAg-transactivated protein 4) (Protein C35), MIEN1, C17orf37 RDX12 XTP4
<b>Species</b>	Homo sapiens (Human)
<b>Research Area</b>	Tags & Cell Markers
<b>Target Names</b>	MIEN1

## Image

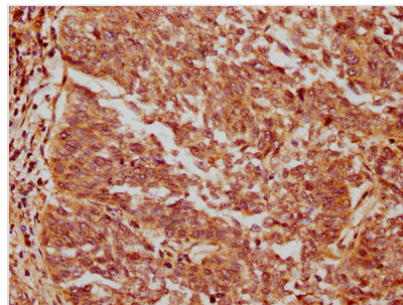

IHC image of CSB-PA874795LA01HU diluted at 1:200 and staining in paraffin-embedded human cervical cancer performed on a Leica Bond™ system. After dewaxing and hydration, antigen retrieval was mediated by high pressure in a citrate buffer (pH 6.0). Section was blocked with 10% normal goat serum 30min at RT. Then primary antibody (1% BSA) was incubated at 4°C overnight. The primary is detected by a biotinylated secondary antibody and visualized using an HRP conjugated SP system.