



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7


mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Boc-NH-O-C1-NHS ester

Cat. No.:	HY-133405		
CAS No.:	80366-85-4		
Molecular Formula:	C ₁₁ H ₁₆ N ₂ O ₇		
Molecular Weight:	288.25		
Target:	PROTAC Linkers		
Pathway:	PROTAC		
Storage:	Powder	-20°C	3 years
		4°C	2 years
	In solvent	-80°C	6 months
		-20°C	1 month

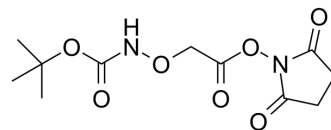

SOLVENT & SOLUBILITY

In Vitro	DMSO : 250 mg/mL (867.30 mM; Need ultrasonic)			
		Solvent Concentration	Mass	
			1 mg	5 mg
	Preparing Stock Solutions	1 mM	3.4692 mL	17.3461 mL
		5 mM	0.6938 mL	3.4692 mL
		10 mM	0.3469 mL	1.7346 mL
	Please refer to the solubility information to select the appropriate solvent.			
In Vivo	<ol style="list-style-type: none"> Add each solvent one by one: 10% DMSO >> 40% PEG300 >> 5% Tween-80 >> 45% saline Solubility: ≥ 2.08 mg/mL (7.22 mM); Clear solution Add each solvent one by one: 10% DMSO >> 90% (20% SBE-β-CD in saline) Solubility: ≥ 2.08 mg/mL (7.22 mM); Clear solution Add each solvent one by one: 10% DMSO >> 90% corn oil Solubility: ≥ 2.08 mg/mL (7.22 mM); Clear solution 			

BIOLOGICAL ACTIVITY

Description	Boc-NH-O-C1-NHS ester is an alkyl/ether-based PROTAC linker that can be used in the synthesis of PROTACs ^[1] .
IC₅₀ & Target	Alkyl/ether
In Vitro	PROTACs contain two different ligands connected by a linker; one is a ligand for an E3 ubiquitin ligase and the other is for the target protein. PROTACs exploit the intracellular ubiquitin-proteasome system to selectively degrade target proteins ^[1] . MCE has not independently confirmed the accuracy of these methods. They are for reference only.

REFERENCES

[1]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 2018 Oct;36:553-562

Caution: Product has not been fully validated for medical applications. For research use only.

Tel: 609-228-6898

Fax: 609-228-5909

E-mail: tech@MedChemExpress.com

Address: 1 Deer Park Dr, Suite Q, Monmouth Junction, NJ 08852, USA