



# SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

## Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!  
See the following pages for more information!



### Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

### Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

### SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7


[mail@szabo-scandic.com](mailto:mail@szabo-scandic.com)

[www.szabo-scandic.com](http://www.szabo-scandic.com)

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

## Amino-PEG4-C1-Boc

Cat. No.:	HY-42619
CAS No.:	864680-64-8
Molecular Formula:	C <sub>14</sub> H <sub>29</sub> NO <sub>6</sub>
Molecular Weight:	307.38
Target:	PROTAC Linkers
Pathway:	PROTAC
Storage:	4°C, stored under nitrogen * In solvent : -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (stored under nitrogen)

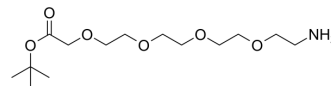

### SOLVENT & SOLUBILITY

In Vivo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Add each solvent one by one: PBS Solubility: 75 mg/mL (244.00 mM); Clear solution; Need ultrasonic</li> <li>Add each solvent one by one: 10% DMSO &gt;&gt; 40% PEG300 &gt;&gt; 5% Tween-80 &gt;&gt; 45% saline Solubility: ≥ 2 mg/mL (6.51 mM); Clear solution</li> <li>Add each solvent one by one: 10% DMSO &gt;&gt; 90% (20% SBE-β-CD in saline) Solubility: ≥ 2 mg/mL (6.51 mM); Clear solution</li> <li>Add each solvent one by one: 10% DMSO &gt;&gt; 90% corn oil Solubility: ≥ 2 mg/mL (6.51 mM); Clear solution</li> </ol>
---------	--

### BIOLOGICAL ACTIVITY

Description	Amino-PEG4-C1-Boc is a PEG-based PROTAC linker that can be used in the synthesis of PROTACs <sup>[1]</sup> .
IC <sub>50</sub> & Target	PEGs
In Vitro	PROTACs contain two different ligands connected by a linker; one is a ligand for an E3 ubiquitin ligase and the other is for the target protein. PROTACs exploit the intracellular ubiquitin-proteasome system to selectively degrade target proteins <sup>[1]</sup> MCE has not independently confirmed the accuracy of these methods. They are for reference only.

### REFERENCES

[1]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 2018 Oct;36:553-562

---

**Caution: Product has not been fully validated for medical applications. For research use only.**

Tel: 609-228-6898

Fax: 609-228-5909

E-mail: [tech@MedChemExpress.com](mailto:tech@MedChemExpress.com)

Address: 1 Deer Park Dr, Suite Q, Monmouth Junction, NJ 08852, USA