



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7


mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

CM-H2DCFDA

Cat. No.:	HY-D1713
CAS No.:	850013-49-9
Molecular Formula:	C ₂₇ H ₁₉ Cl ₃ O ₈
Molecular Weight:	577.79
Target:	Reactive Oxygen Species
Pathway:	Immunology/Inflammation; Metabolic Enzyme/Protease; NF-κB
Storage:	4°C, protect from light * In solvent : -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light)

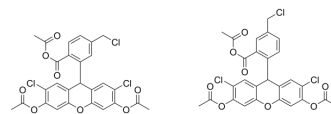

BIOLOGICAL ACTIVITY

Description	CM-H2DCFDA is a derivative of H2DCFDA (HY-D0940). CM-H2DCFDA can be used to determine cellular oxidant levels (Ex/Em: 495/530 nm). CM-H2DCFDA is light-sensitive ^[1] .
In Vitro	Guidelines ^[2] (Following is our recommended protocol. This protocol only provides a guideline, and should be modified according to your specific needs). ROS Measurement: 1. Incubate the cells according to your normal protocol. 2. Treat cells with 10 μM CM-H2DCFDA for 30 min at 37°C in darkness. 3. Wash the excess probe. 4. Analyze sample on a flow cytometer, fluorescence microscopy, or fluorescence microplate reader. MCE has not independently confirmed the accuracy of these methods. They are for reference only.

CUSTOMER VALIDATION

- Front Public Health. 2023 Jul 13;11:1222762.

See more customer validations on www.MedChemExpress.com

REFERENCES

[1]. Oparka M, et al. Quantifying ROS levels using CM-H2DCFDA and HyPer. *Methods*. 2016 Oct 15;109:3-11.

[2]. Kolarova H, et al. Production of reactive oxygen species after photodynamic therapy by porphyrin sensitizers. *Gen Physiol Biophys*. 2008 Jun;27(2):101-5.

Caution: Product has not been fully validated for medical applications. For research use only.

Tel: 609-228-6898

Fax: 609-228-5909

E-mail: tech@MedChemExpress.com

Address: 1 Deer Park Dr, Suite Q, Monmouth Junction, NJ 08852, USA